

Formulario de Solicitud de Aditamento

Información del Solicitante

Fecha de solicitud

Nombre de persona que usará el aditamento			N° registro Usuario FUNTER		
Referido por (Cuenta propia, institución, alcaldía, etc.)			DUI usuario o cuidador si es < de edad:		
Estado civil y ocupación:	_____ ; _____		Nombre cuidador		
Teléfono o celular de persona o familiar:		Fecha de Nacimiento:		Edad:	
Dirección de vivienda, depart y municipio:					
Diagnóstico médico o discapacidad					

***Fecha y nombre de recepción solicitud :** _____ ; _____ (Trabajo social, asistente DM)

Tipo de aditamento solicitado	Descripción	Marque con X	CI (uso interno)
Andadera adulto			
Andadera niño			
Bastón			
Ferula de miembro superior			
Férula o inmovilizador de miembro inferior			
Otros:			

- Disponibilidad dependerá de existencia

Firma y Nombre de persona que hace entrega

Fecha entrega

Firma y Nombre de persona recibe donación

Fecha entrega

COMO MEDIR PARA UN BASTÓN


Una mala regulación de su altura puede ocasionar lesiones o empeorar la situación de la persona que lo utiliza.

La medida correcta del bastón permite que el usuario conserve una postura erguida con su codo ligeramente flexionado, así el peso del cuerpo descansa sobre el bastón al caminar.

Hay que tener en cuenta que la medida debe incluir el mango o empuñadura del bastón. Esta cuestión es fundamental porque no todos los bastones son ajustables.

- 1º- Use los zapatos que utiliza regularmente.
- 2º- Posicione el mango del bastón en el suelo como lo indican las figuras A.
- 3º- Relaje el brazo al costado del cuerpo con normalidad (inclinación del codo aproximadamente de 20 a 30 grados).
- 4º- La longitud correcta de un bastón se mide desde la muñeca al suelo.


Medida en cms: _____

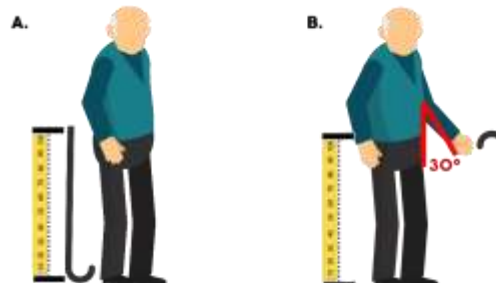

COMO MEDIR PARA UNA ANDADERA

Para saber qué altura debe tener la andadera, la persona tiene que permanecer de pie con los brazos extendidos de una manera natural. La distancia que hay entre el pliegue de la muñeca hasta la superficie del suelo debería ser la altura que se elija, pues va a respetar la estructura corporal de la persona mayor.

Medida en cms: _____

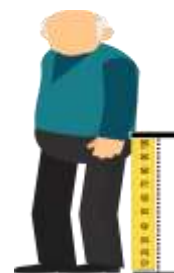

COMO MEDIR PARA UNA MULETA

La persona tiene que estar de pie apoyándose con un brazo en una pared y con el otro extendido a un lado. Sostener la parte superior de la muleta firmemente entre el pecho y el interior del brazo (medida 1). No deje que la parte superior de la muleta haga presión contra la axila. La presión constante puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos. Sostener el peso colocando las manos sobre los puntos de apoyo para las manos.

Los apoyos para las manos deben quedar a nivel de cadera (medida 2) y asegurarse que deben estar acolchados.

Medida en cms: _____





Servicio de Sillas de Ruedas Adaptadas
100% donadas